

Contatyp™

CX-RO II

Medical X-ray film
green sensitive

Orthochromatischer medizinischer Röntgenfilm

- Feinkörnigkeit, hohe Empfindlichkeit und idealer Verlauf der Schwärzungskurve
- Hervorragende Gradation, kontrastreiche und hohe Detailwiedergabe
- Maschinelle oder manuelle Verarbeitung
- Für den Einsatz mit grünen Verstärkerfolien

Film orthochromatique pour la radiologie médicale

- Haute sensibilité, grains fins, courbe de noircissement idéale
- Excellente gradation, riche en contraste et haute définition
- Traitement en machine ou manuel
- S'utilise avec des écrans renforçateurs émettant dans le vert

Pellicola universale per la radiologia medica.

- Alta sensibilità, grana fina
- Eccellente curva caratteristica, ricco di contrasto, alta definizione
- Trattamento automatico o manuale
- Si utilizza con schermi di rinforzo che emettono nel verde

Orthochromatic film for medical radiography

- High sensitivity, fine grain, ideal gradation
- Excellent characteristic curve, high contrast with good definition
- For automatic or manuel processing
- To be used with green light emitting scrennns

Technical data

Light sensitivity LE : 1,59

Light contrast LK : 2,45

Automatic film processing ≥ 90 s



Storage °C: 4 – 23°C



Storage rel. hum. 40 – 60% according DIN 6860



Storage vertical

Chemical Developer DX-31

Chemical Fixer FX-31



Darkroom safelight dark red R20 ND.4



Shield from penet. radiation max. 80 nGy/h



Recycling box


Die Schwankungen der Empfindlichkeit des Films (relativer Beitrag zur Empfindlichkeit S), die auf den Packungen mit **Contatyp™ CX-RO II** gekennzeichnet sind, liegen für den überwiegenden Teil der ausgelieferten Ware unter $\pm 10\%$. Bei korrekter Lagerung und Transport nach DIN 6860 übersteigen die Schwankungen der Empfindlichkeit auch am Ablaufdatum nicht $\pm 15\%$.

La variation de la sensibilité des films (valeur relative de la sensibilité S), livrés avec le label **Contatyp™ CX-RO II**, est inférieure à $\pm 10\%$. A la date de péremption des films, si le transport et le stockage respectent les normes DIN 6860, la variation de sensibilité n'excède pas $\pm 15\%$.

Al momento della consegna la variazione di sensibilità dei film (valore relativo della sensibilità S), con etichetta **Contatyp™ CX-RO II**, è inferiore al $\pm 10\%$. Alla scadenza dei film, se il trasporto e lo stoccaggio sono eseguiti nel rispetto delle norme DIN 6860, la variazione di sensibilità non sarà maggiore del $\pm 15\%$.


The variation of the sensibility of the film (value relative to sensibility S), which is signed with the label **Contatyp™ CX-RO II** is for most of the delivered parts under $\pm 10\%$. If transport and storage correspond to the norm DIN 6860, the variation of the sensibility even on the date of expiration will not be higher than $\pm 15\%$.

Density curve

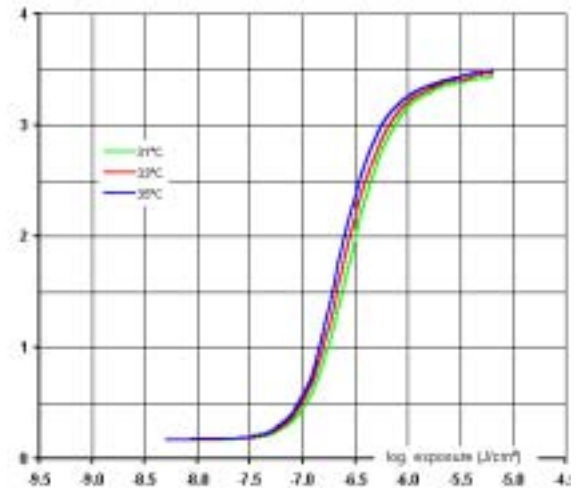

Log. Rel. Sensitivity emission

Spectral sensitivity

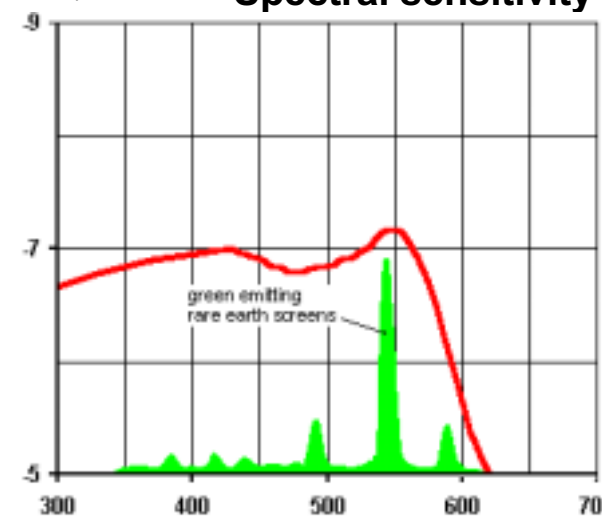

MTF

